





HK-100VET Ветеринарный инфузионный насос



- Защита от свободного потока
Встроенная функция остановки потока помогает снизить риск случайного свободного потока

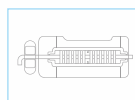

- Интерфейс RS232
Запись событий и информация тревоги могут переданы в компьютере

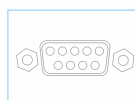

- 90° вращающийся кронштейн
Можно горизонтально и вертикально укрепить



- Съемное тело насоса
Удобно очистить

Особенность:

- Запись истории инфузии
- Дизайн компактный, легкий вес и простое управление
- Функция KVO, автоматически начать KVO когда инфузия окончилась
- Обнаружение обратного вращения
- Различные визуальные и звуковые сигналы тревоги
- Отображение в режиме реального времени
- 3 регулируемых окклюзии давления
- Съемное тело насоса, удобно очистить
- Защита от свободного потока
- Двойной CPU обеспечит инфузии безопасно



НК-100VET

Ветеринарный инфузионный насос



Технические характеристики:	
Скорость инфузии	0.1–2001мл/ч
Точность инфузии	±5% после корректировки
Капельница	Предназначен для работы несколько стандартные капельницы
Задаваемый объем инфузии(VTBI)	0–9999мл
Общий объем инфузии	0–36000мл
Скорость KVO	1–5мл/ч
Скорость болюс	300–1200мл/ч
Режим инфузии	Режим скорости режим времени режим капельный режим веса
Скорость промывки	600мл/ч
Детектор появления пузырьков	Детектор ультразвукового колебания с 4 уровнями воздуха в линии
Окклюзия	(40.0–160.0)КПа 3 регулируемых окклюзии давления: низкий–средний–высокий
Тревоги	Аккумулятор работает, открыта дверца, окклюзия, близость окончания инфузии, нет управления, окончание инфузии, низкий заряд аккумулятора, разрядка аккумулятора, неисправность и т.д
Функция	*Анти–болюс:уменьшить нежелательный объем болюса после удаления окклюзии *Детектор ультразвукового колебания с 4 уровнями воздуха в линии *Интеллектуальная тревога обнаружения давления *Обнаружение обратного вращения *Запись истории инфузии можно передать в компьютере *Отображение в режиме реального времени скорости инфузии/скорости капельный, VTBI, объем инфузии, время и т.д *Болюс *Громкость зуммера регулируемая *KVO *Съемное тело насоса, удобно очистить
Электропитание	DC:12±1.2V AC:100–240V, 50–60HZ
Аккумулятор	Перезаряжаемый литиевой аккумулятор, 7.4V 1900mAh
Время разряды аккумулятора	10 часов с включением питания, 3 часа с выключением питания
Время работы аккумулятора	При скорости инфузии 25мл/ч обеспечивает до 6 часов непрерывной работы
Расходы энергии	25VA
Классификация	Класс 1, тип CF
Водозащитный	IP×3
Габариты	145×100×120мм
Вес	1.4кг
Условие работы	Температура:5℃–40℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 86–106kPa
Условие транспорта	Температура:–20℃–60℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 50–106kPa
Условие хранения	Температура:–20℃–45℃, влажность:10%–95%, Атмосферное давление: 50–106kPa